

センサリーアイ FX _ インストール&セットアップガイド


【インストール準備】

ソフトウェア CD 及びライセンスカードをご用意下さい。

※ライセンスのアクティブ化(有効化)及びユーザー登録を行うにはインターネット接続が必要です。

また、セキュリティが強固な場合や管理者権限が制限されているパソコンでは、アクティブ化できない場合がございますので、その際はシステム管理者にご相談下さい。


1. インストール

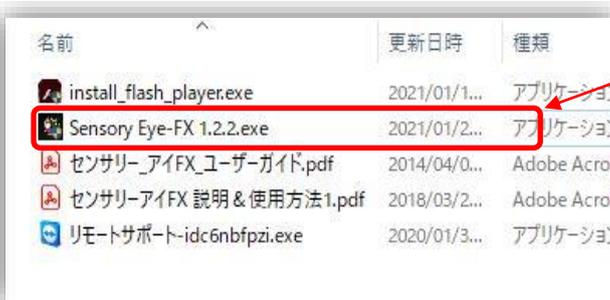


1) ソフトウェア CD をパソコンに挿入し、保存されている「Sensory Eye-FX 1.2.2.exe」アプリケーションをダブルクリックして起動します。
※バージョンは変更になる場合がございます。





2) 実行をクリックします。

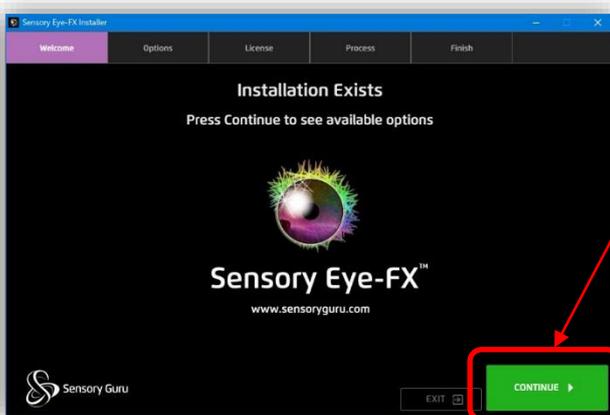


3) 「Sensory Eye-FX」のインストーラが起動しますので、「CONTINUE」を選択してソフトウェアのインストールを開始します。

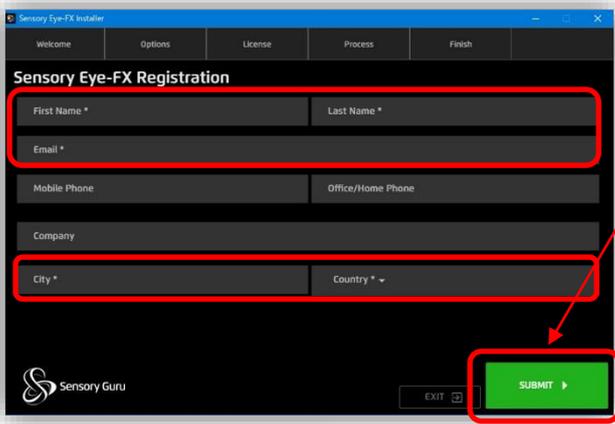

4) ユーザー登録を行います。
※の箇所は必須ですので必ず入力して下さい。
また、日本語入力はしないで下さい。
必要箇所に入力したら「SUBMIT」を選択して次に進みます。

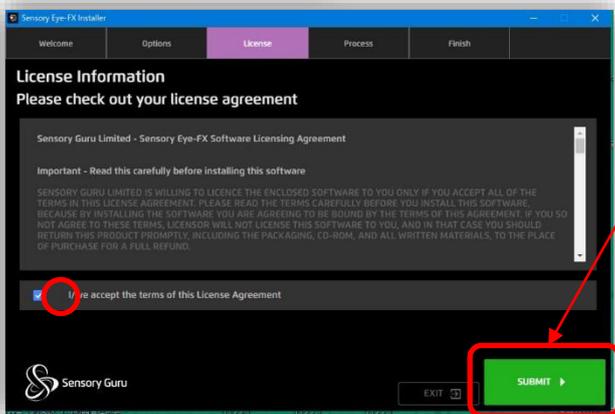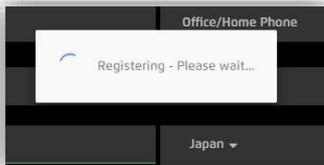

5) ライセンス条項を認証します。
ライセンス条項に書かれている内容を読んで同意する場合はチェックボックスにチェックを入れて「SUBMIT」を選択して次に進みます。
※チェックしないと次には進めません。

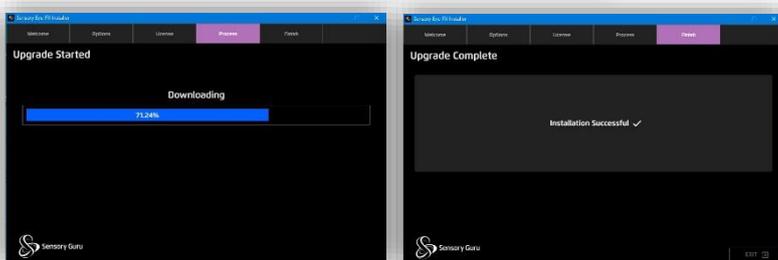

6) 自動でソフトウェアがインストールされ、デスクトップ上にショートカットアイコンが作成されます。

2. ライセンスのアクティブ化(有効化)



1) デスクトップ上にある「Sensory Eye-FX」のショートカットアイコンをダブルクリックし、起動します。





2) ライセンスのアクティブ化。
 ライセンスカードに記載されているアクティベーションキーを入力し、「Register」をクリックします。
 ライセンスが認証され、ソフトウェアが起動します。
 ※ライセンスはカードに記載されている通りに入力して下さい。



3) 各ゲームの設定を変更する場合は、「Sensory Eye-FX」のショートカットアイコンを右クリックし、「管理者として実行」を選択して起動して下さい。各ゲームの右側にあるボックスをクリックすると設定画面が表示されます。

3. Level 1 「Tone Matrix」の設定

注意: 「Sensory Eye-FX」の 30 種類のゲームの中で唯一「Tone Matrix」は動作させるのに「Flash player」の設定マネージャの変更を行う必要があります。
 変更しないと動作しません。必ず、以下の手順で設定を行って下さい。

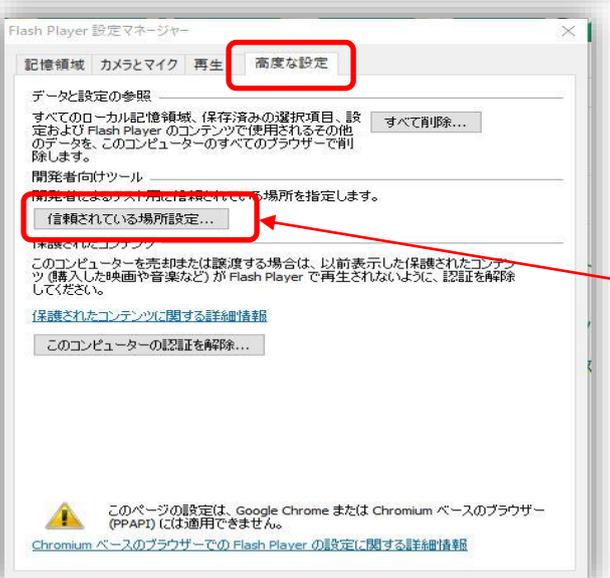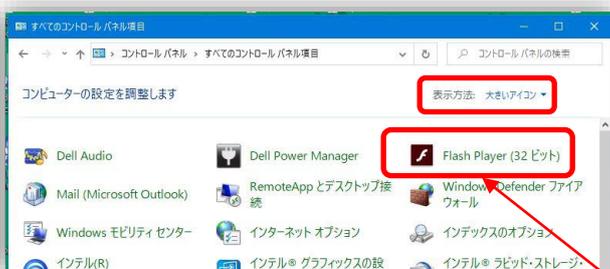

Tone Matrix

1) コントロールパネルを開き、表示方法の中から「大きいアイコン」を選択します。アイコンの中から「Flash Player(32ビット)」を選択します。

2) 高度な設定タブを開き、「信頼されている場所設定」を選択します。

注意: コントロールパネルに「Flash Player(32ビット)」が無い場合は、付属 CD から「Flash player」をインストールして設定を行って下さい。
 設定後、「Flash player」を削除しても「Tone Matrix」は使用できます。

3) 「追加」をクリックします。

4) 「フォルダーを追加」をクリックします。

5) 「C:\Program Files(x86)\SensoryGuru」にある「Sensory Eye-FX」フォルダーを選択し、「OK」をクリックします。

6) 「確認」をクリックします。


7) 指定したフォルダーが追加されているのを確認してから、「閉じる」をクリックします。

これで、インストール及びセットアップは完了です。
ソフトウェアを起動して、各ゲームをご確認下さい。


4. 「Adobe Flash player」サポート終了に伴うアップデート及びセットアップについて

「Adobe Flash player」のサポート終了に伴い、2021年1月からWindowsのパソコンにおいて同ソフトウェアの利用がブロックされて使用できなくなりました。この影響でセンサリーアイ FXにおいても2021年1月以前にインストールしてご利用いただいていたパソコンでは動作しなくなり、ご利用頂いていたユーザー様にはご不便をお掛け致しました。以下の手順でアップデートする事によりご利用頂けますので、お手数をお掛け致しますがよろしくお願い申し上げます。


株式会社クreaクト サポート

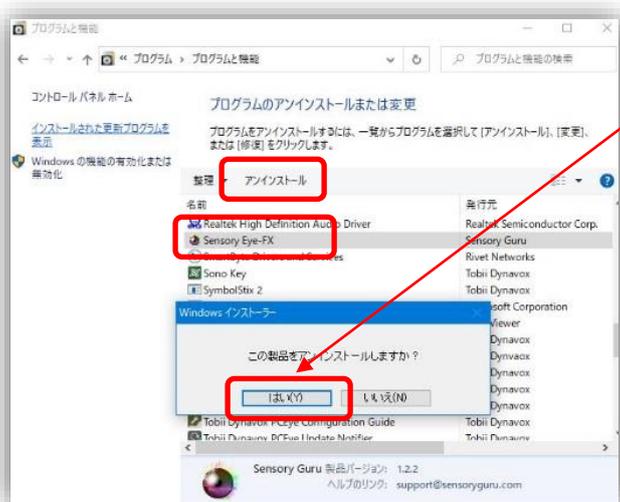

1) 「Sensory Eye-FX」ソフトウェアの削除。
コントロールパネルの「プログラムと機能」から「Sensory Eye-FX」を選択し、アンインストールします。

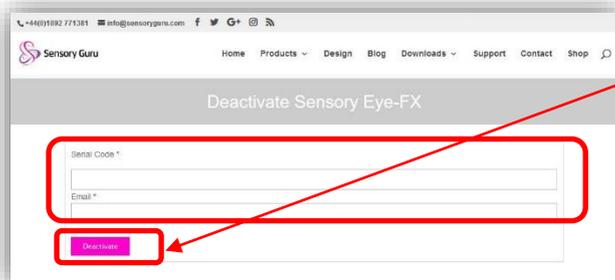


2) アンインストール後、自動でライセンスの非アクティブ化(無効化)Web ページが表示されますので、ライセンス番号と登録したメールアドレスを入力し、非アクティブ化を行って下さい。

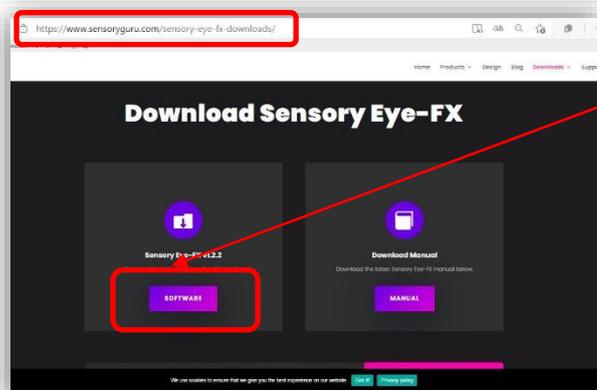

3) アップデート用ソフトウェアのダウンロード。
下記のメーカーサイトにアクセスし、ソフトウェアをダウンロードして下さい。

メーカー: Sensory Guru ダウンロードサイト URL


<https://www.sensoryguru.com/sensory-eye-fx-downloads/>

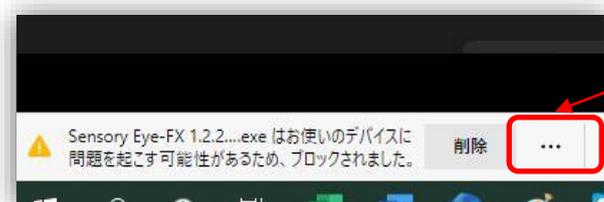

4) ダウンロードをブロックされた場合は、「…」のオプションを開き「保存」を選択し、「詳細表示」の「保持する」を選択してダウンロードして下さい。



5) アップデートを行う。
ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、アップデートを開始します。
1 ページの **1.インストールの 3)**以降を参考にしてアップデート及び「Tone Matrix」の設定作業を行って下さい。

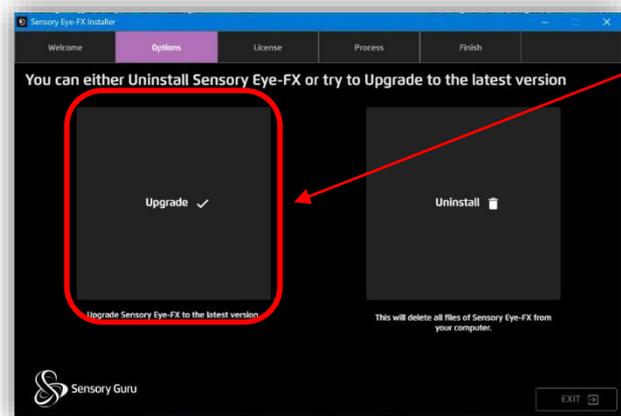

6) 左図が表示された場合は、「Upgrade」を選択して下さい。

Windows7 パソコンをご利用の皆様へ

Windows7 の OS は既にマイクロソフトでサポート終了になっておりますので、センサリーアイ FX も Windows7 でのサポートは終了となります。Windows10 のパソコンへの移行をお願い致します。

※「Adobe Flash player」サポート終了に伴うアップデート&セットアップについて
Windows7 パソコンでも上記の通りにアップデートする事でご利用いただけますが、「Tone Matrix」のセットアップについて注意点がございます。Windows10 のパソコンには入っている 3 ページの 3-1) 「Flash Player(32ビット)」が、「Adobe Flash player」を削除した Windows7 のパソコンにはございません。再度、「Adobe Flash player」をインストールしてからセットアップする必要があります。Windows7PC への再インストール・アップデートでお困りの際は当社サポートへお問合せ下さい。

総輸入販売元: 株式会社 クレアクト Tobii アシスティブ事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-8-13 五反田増島ビル 4 階

TEL: 03-3442-5401 FAX: 03-3442-5402 メール: info@creact.co.jp Web: www.creact.co.jp